


简体中文：

3C 软件操作的技术要求 (3C Rapid Pain Relief 1.0)

通过这个《快速、精准祛痛的 3C 技术》软件，您可以立刻找到疼痛的对应点，即，需要按摩或针刺的点或部位。当您面对一个疼痛患者时，在对其疼痛进行治疗前，定位非常重要，要想准确定位，必须要将患者肢体放置于标准体位。

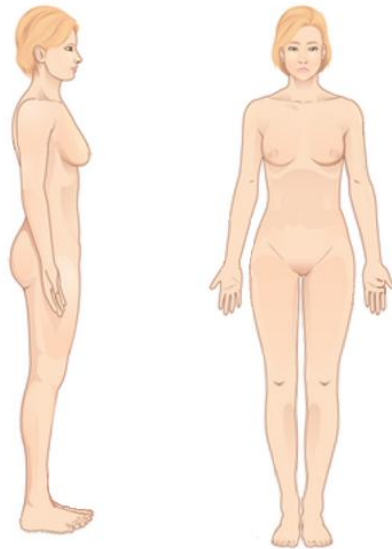

标准体位：双足并拢，脚尖向前，眼看前方，双上肢下垂，手掌心向前，手背朝后。这时，对于上肢而言，桡侧即外侧，尺侧即内侧，前面为屈侧，后面为伸侧。

对于下肢而言，腓侧即外侧，胫侧即内侧，前面为伸侧，后面为屈侧。

当您在确定一个痛点或寻找一个对应点时，务必要将肢体放置于这个标准体位，假如前臂旋转了，比如内旋了，就会造成混乱，对于腕关节来说，外侧跑到了前方或内侧，肘关节则也是内旋，外侧跑了腕关节路径的大约一半，这时，你要确定疼痛的位置或对应点的定位一定会搞错。

当您打开软件，设置语言后可以看到，工具栏有测量工具，是专为头部和胸腹部所设，点击测量工具后，先在 O 点点击一下，然后将鼠标移动到疼痛部位，红色圆点就是对应点。

对于四肢，您可以直接点击疼痛部位，对应点和疼痛部位都将变成红色。

图片上没有标注左右，但下方有箭头，箭头指向电脑操作者的那边，图像表示的就是患者的那边。如果您需要另一边，可以点击工具栏内的图像翻转按钮。

本软件是为了让更多的人能够精准地取穴而设计，至于 3C 技术的深层的理论依据和运行机理，您可以阅读我们出版的《快速祛痛的 3C 技术》一书，本书有中文版、法文版和英文版，购书链接可以在我们协会网站找到：<https://santemtc.com>

我们协会网站还有几个介绍 3C 技术的视频，供您学习参考。

您还可以加入 « 3C 2025 瑞典微信学习群 », 您可以通过朋友介绍, 或发邮件给我们 (contact@santemtc.com), 或者在视频下方留言, 或在 « 针灸医生们学习 3C 技术后的反馈 » <https://santemtc.com/3c-temoin> 下方留言告诉我们。

感谢您对我们的信任与支持。


国际自然健康协会

中文繁體：

3C 軟件操作的技術要求

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

通過這個 « 快速、精準祛痛的 3C 技術 » 軟件, 您可以立刻找到疼痛的對應點, 即, 需要按摩或針刺的點或部位。當您面對一個疼痛患者時, 在對其疼痛進行治療前, 定位非常重要, 要想準確定位, 必須要將患者肢體放置於標準體位。

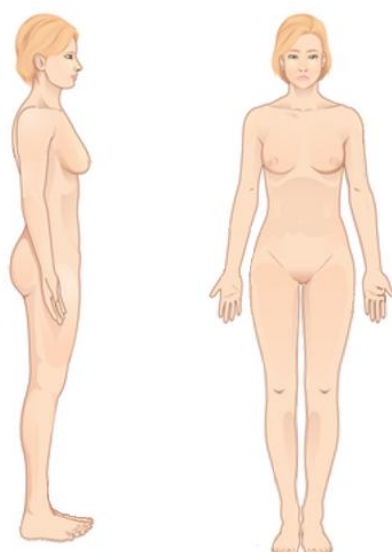

標準體位: 雙足並攏, 腳尖向前, 眼看前方, 雙上肢下垂, 手掌心向前, 手背朝後。這時, 對於上肢而言, 橈側即外側, 尺側即內側, 前面為屈側, 後面為伸側。

對於下肢而言, 腓側即外側, 脛側即內側, 前面為伸側, 後面為屈側。

當您在確定一個痛點或尋找一個對應點時, 務必要將肢體放置於這個標準體位, 假如前臂旋轉了, 比如內旋了, 就會造成混亂, 對於腕關節來說, 外側跑到了前方或內側, 肘關節則也是內旋, 外側跑了腕關節路徑的大約一半, 這時, 你要確定疼痛的位置或對應點的定位一定會搞錯。

當您打開軟件，設置語言後可以看到，工具欄有測量工具，是專為頭部和胸腹部所設，點擊測量工具後，先在 O 點點擊一下，然後將鼠標移動到疼痛部位，紅色圓點就是對應點。

對於四肢，您可以直接點擊疼痛部位，對應點和疼痛部位都將變成紅色。

圖片上沒有標註左右，但下方有箭頭，箭頭指向電腦操作者的那邊，圖像表示的就是患者的那邊。如果您需要另一邊，可以點擊工具欄內的圖像翻轉按鈕。

本軟件是為讓更多的人能夠精準地取穴而設計，至於 3C 技術的深層的理论依據和運行機理，您可以閱讀我們出版的《快速祛痛的 3C 技術》一書，本書有中文版、法文版和英文版，購書鏈接可以在我們協會網站找到：<https://santemtc.com>

我們協會網站還有幾個介紹 3C 技術的視頻，供您學習參考。

您還可以加入 « 3C 2025 瑞典微信學習群 », 您可以通過朋友介紹，或發郵件給我們 (contact@santemtc.com)，或者在視頻下方留言，或在 « 針灸醫生們學習 3C 技術後的反饋 » <https://santemtc.com/3c-temoin> 下方留言告訴我們。

謝謝您對我們的信任與支持。



簡介.pdf

國際自然健康協會

English :

Technical Requirements for Using the 3C Software

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

With this software based on the “3C technique for rapid and precise pain relief,” you can immediately identify the point corresponding to the pain—that is, the point or area that needs to be massaged or needled.

When dealing with a patient in pain, accurate localization is essential before any treatment. To achieve precise localization, it is necessary to place the patient’s limbs in a standardized position.

Standardized position:

Both feet together, toes pointing forward, eyes looking straight ahead; both upper limbs relaxed along the sides of the body, palms facing forward, and the backs of the hands facing backward.

In this position, for the upper limbs:


- the radial side corresponds to the lateral (outer) side,
- the ulnar side corresponds to the medial (inner) side,
- the anterior surface is the flexor surface,
- the posterior surface is the extensor surface.

For the lower limbs:

- the fibular (peroneal) side corresponds to the lateral (outer) side,

- the tibial side corresponds to the medial (inner) side,
- the anterior surface is the extensor surface,
- the posterior surface is the flexor surface.

When identifying a painful point or searching for a corresponding point, you must strictly place the limb in this standardized position. For example, if the forearm is rotated (internal rotation), confusion will occur: at the wrist, the lateral side will shift toward the front or the medial side; at the elbow, internal rotation will also cause the lateral side to shift approximately halfway along the wrist pathway. In such cases, the localization of the painful point or corresponding point will inevitably be incorrect.

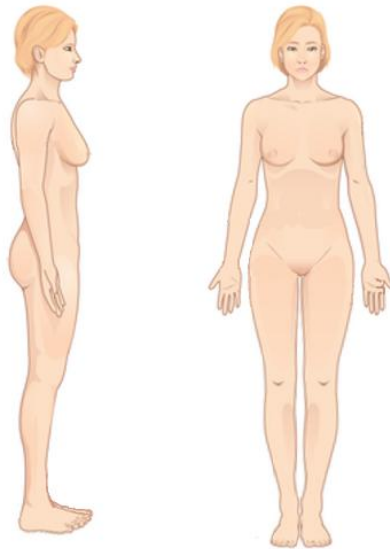

After opening the software and selecting the language, you will see a measurement tool in the toolbar, specifically designed for the head and the thoracoabdominal region. After clicking the measurement tool, first click on point O, then move the mouse to the painful area; the red dot indicates the corresponding point.

For the limbs, you can directly click on the painful area; both the corresponding point and the painful area will appear in red.

The images do not indicate left or right, but arrows are shown at the bottom. The arrow points toward the side of the computer operator, and the image therefore represents the patient's side. If you need the opposite side, you can click the image flip button in the toolbar. This software was designed to enable as many people as possible to locate points accurately. As for the deeper theoretical foundations and operating mechanisms of the 3C technique, you may refer to our book *"Rapid Pain Relief with the 3C Technique."* This book is available in Chinese, French, and English. The purchase link can be found on our association's website:

<https://santemtc.com>

On our association's website, you will also find several introductory videos on the 3C technique to support your learning.

You may also join the "3C 2025 Sweden WeChat Learning Group." You can do so through a friend's recommendation, by sending us an email (contact@santemtc.com), by leaving a comment under the videos, or by writing to us under the section *"Testimonials from Acupuncturists after Learning the 3C Technique"*:

<https://santemtc.com/3c-temoin>

Thank you for your trust and support.

International Natural Health Association

Français :

Exigences techniques pour l'utilisation du logiciel 3C

Grâce à ce logiciel de la « technique 3C pour un soulagement rapide et précis de la douleur », vous pouvez identifier immédiatement le point correspondant à la douleur, c'est-à-dire le point ou la zone à masser ou à piquer.

Lorsque vous êtes face à un patient douloureux, la localisation est primordiale avant tout traitement. Pour localiser avec précision, il est indispensable de placer les membres du patient dans une position standardisée.

Position standardisée :


Les deux pieds joints, les orteils orientés vers l'avant, le regard droit devant, les deux membres supérieurs relâchés le long du corps, les paumes des mains tournées vers l'avant et le dos des mains vers l'arrière.

Dans cette position, pour les membres supérieurs :

- le côté radial correspond au côté externe,
- le côté ulnaire correspond au côté interne,
- la face antérieure est la face fléchisseuse,
- la face postérieure est la face extenseuse.

Pour les membres inférieurs :

- le côté fibulaire correspond au côté externe,
- le côté tibial correspond au côté interne,
- la face antérieure est la face extenseuse,
- la face postérieure est la face fléchisseuse.

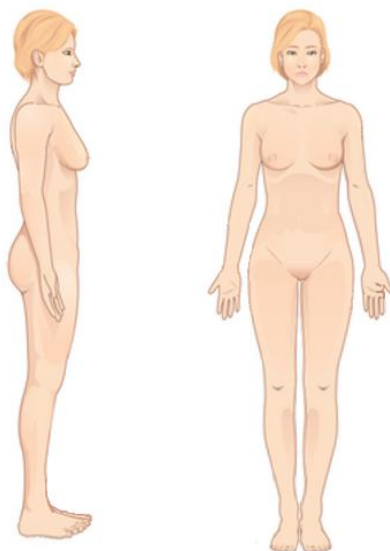

Lorsque vous déterminez un point douloureux ou recherchez un point correspondant, vous devez impérativement placer le membre dans cette position standardisée. Si, par exemple, l'avant-bras est en rotation (rotation interne), cela créera une confusion : au niveau du poignet, le côté externe se déplacera vers l'avant ou l'intérieur ; au niveau du coude, la rotation interne fera également que le côté externe se déplacera sur environ la moitié du trajet du poignet. Dans ce cas, la localisation du point douloureux ou du point correspondant sera nécessairement erronée.

Après avoir ouvert le logiciel et choisi la langue, vous verrez dans la barre d'outils un outil de mesure, spécialement conçu pour la tête ainsi que pour la région thoraco-abdominale. Après avoir cliqué sur l'outil de mesure, cliquez d'abord sur le point O, puis déplacez la souris vers la zone douloureuse : le point rouge correspond au point correspondant.

Pour les membres, vous pouvez cliquer directement sur la zone douloureuse ; le point correspondant et la zone douloureuse apparaîtront tous deux en rouge.

Les images ne portent pas d'indication gauche/droite, mais des flèches sont visibles en bas : la flèche pointe vers le côté de l'utilisateur de l'ordinateur, et l'image représente donc le côté du patient. Si vous avez besoin de l'autre côté, vous pouvez cliquer sur le bouton de retournement de l'image dans la barre d'outils.

Ce logiciel a été conçu afin de permettre au plus grand nombre de localiser les points avec précision. Quant aux fondements théoriques profonds et au mécanisme de fonctionnement de la technique 3C, vous pouvez consulter notre ouvrage « *Soulagement Rapide des douleurs par 3C Technique* ». Ce livre existe en versions chinoise, française et anglaise. Le lien d'achat est disponible sur le site de notre association : <https://santemtc.com>

Sur le site de notre association, vous trouverez également plusieurs vidéos de présentation de la technique 3C pour vous aider dans votre apprentissage.

Vous pouvez aussi rejoindre le « Groupe d'apprentissage WeChat 3C 2025 Suède ». Pour cela, vous pouvez passer par une recommandation d'un ami, nous envoyer un courriel (contact@santemtc.com), laisser un commentaire sous les vidéos, ou nous écrire sous la rubrique « Témoignages des acupuncteurs après l'apprentissage de la technique 3C » : <https://santemtc.com/3c-temoinfr>

Merci de votre confiance et de votre soutien.

Association Internationale de Santé Naturelle

Deutsch :

Technische Anforderungen für die Nutzung der 3C-Software

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

Mithilfe dieser Software der „3C-Technik zur schnellen und präzisen Schmerzlinderung“ können Sie den der Schmerzsymptomatik entsprechenden Punkt sofort identifizieren, das heißt den Punkt oder den Bereich, der massiert oder genadelt werden soll. Wenn Sie einem Patienten mit Schmerzen gegenüberstehen, ist die korrekte Lokalisation vor jeder Behandlung von entscheidender Bedeutung. Um eine präzise Lokalisation zu gewährleisten, müssen die Gliedmaßen des Patienten in eine standardisierte Position gebracht werden.

Standardisierte Position:

Beide Füße stehen zusammen, die Zehen zeigen nach vorne, der Blick ist geradeaus gerichtet; beide oberen Extremitäten hängen entspannt seitlich am Körper, die Handflächen zeigen nach vorne und die Handrücken nach hinten.


In dieser Position gilt für die oberen Extremitäten:

- die radiale Seite entspricht der lateralen (äußeren) Seite,
- die ulnare Seite entspricht der medialen (inneren) Seite,
- die Vorderseite ist die Beugeseite (Flexorseite),
- die Rückseite ist die Streckseite (Extensorseite).

Für die unteren Extremitäten gilt:

- die fibuläre (peroneale) Seite entspricht der lateralen (äußeren) Seite,

- die tibiale Seite entspricht der medialen (inneren) Seite,
- die Vorderseite ist die Streckseite (Extensorseite),
- die Rückseite ist die Beugeseite (Flexorseite).

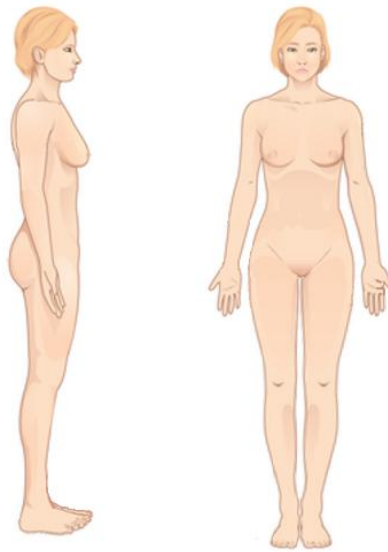

Bei der Bestimmung eines Schmerzpunktes oder der Suche nach einem entsprechenden Punkt müssen die Gliedmaßen zwingend in dieser standardisierten Position gehalten werden. Wird der Unterarm beispielsweise rotiert (Innenrotation), kommt es zu Verwirrungen: Auf Höhe des Handgelenks verschiebt sich die laterale Seite nach vorne oder nach medial; auf Höhe des Ellenbogens bewirkt die Innenrotation ebenfalls, dass sich die laterale Seite über etwa die Hälfte des Verlaufs in Richtung Handgelenk verschiebt. In einem solchen Fall ist die Lokalisation des Schmerzpunktes oder des entsprechenden Punktes zwangsläufig fehlerhaft. Nach dem Öffnen der Software und der Auswahl der Sprache sehen Sie in der Symbolleiste ein Messwerkzeug, das speziell für den Kopf sowie die thorakoabdominale Region entwickelt wurde. Nach dem Anklicken des Messwerkzeugs klicken Sie zunächst auf Punkt O und bewegen anschließend die Maus zur schmerzhaften Stelle; der rote Punkt kennzeichnet den entsprechenden Punkt.

Für die Extremitäten können Sie direkt auf die schmerzhafteste Stelle klicken; sowohl der entsprechende Punkt als auch die Schmerzstelle werden rot dargestellt.

Die Abbildungen enthalten keine Links-/Rechts-Kennzeichnung, jedoch befinden sich am unteren Rand Pfeile. Der Pfeil zeigt zur Seite des Computeranwenders; das Bild stellt somit die Seite des Patienten dar. Wenn Sie die andere Seite benötigen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche zum Spiegeln des Bildes.

Diese Software wurde entwickelt, um möglichst vielen Menschen eine präzise Punktllokalisierung zu ermöglichen. Die tiefergehenden theoretischen Grundlagen sowie der Wirkmechanismus der 3C-Technik sind in unserem Buch „*Schnelle Schmerzlinderung mit der 3C-Technik*“ beschrieben. Das Buch ist in chinesischer, französischer und englischer Sprache erhältlich. Der Kauflink ist auf der Website unseres Verbandes verfügbar:

<https://santemtc.com>

Auf der Website unseres Verbandes finden Sie außerdem mehrere Einführungsvideos zur 3C-Technik, die Sie beim Lernen unterstützen.

Sie können außerdem der „3C WeChat-Lerngruppe Schweden 2025“ beitreten. Dies ist möglich über eine Empfehlung von Freunden, per E-Mail an uns (contact@santemtc.com), durch einen Kommentar unter den Videos oder durch eine Nachricht im Bereich „*Erfahrungsberichte von Akupunkteuren nach dem Erlernen der 3C-Technik*“:

Italiano :

Requisiti tecnici per l'utilizzo del software 3C

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

Grazie a questo software basato sulla « tecnica 3C per un sollievo rapido e preciso dal dolore », è possibile individuare immediatamente il punto corrispondente al dolore, ovvero il punto o l'area da massaggiare o da trattare con ago.

Quando ci si trova di fronte a un paziente con dolore, la localizzazione è fondamentale prima di qualsiasi trattamento. Per ottenere una localizzazione accurata, è indispensabile posizionare gli arti del paziente in una posizione standardizzata.

Posizione standardizzata:


Entrambi i piedi uniti, le punte dei piedi rivolte in avanti, lo sguardo dritto davanti a sé; gli arti superiori rilassati lungo il corpo, i palmi delle mani rivolti in avanti e il dorso delle mani verso l'indietro.

In questa posizione, per gli arti superiori:

- il lato radiale corrisponde al lato laterale (esterno),
- il lato ulnare corrisponde al lato mediale (interno),
- la superficie anteriore è la superficie flessoria,
- la superficie posteriore è la superficie estensoria.

Per gli arti inferiori:

- il lato fibulare (peroneale) corrisponde al lato laterale (esterno),
- il lato tibiale corrisponde al lato mediale (interno),
- la superficie anteriore è la superficie estensoria,
- la superficie posteriore è la superficie flessoria.

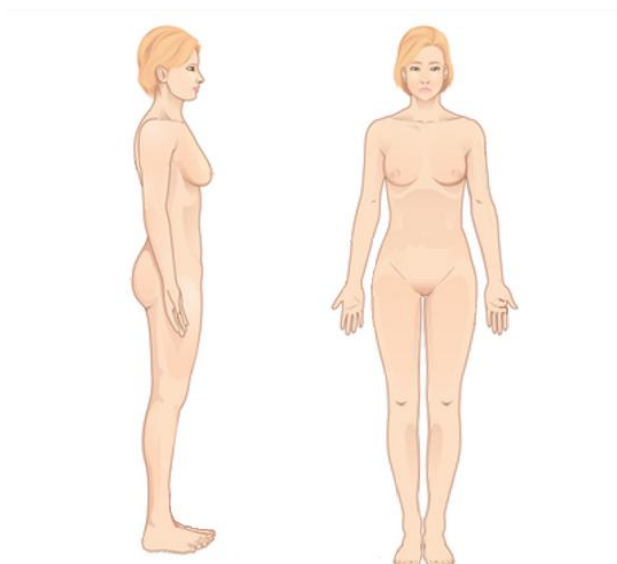

Quando si individua un punto doloroso o si ricerca un punto corrispondente, è indispensabile posizionare l'arto in questa posizione standardizzata. Se, ad esempio, l'avambraccio è in rotazione (rotazione interna), si crea confusione: a livello del polso, il lato laterale si sposterà in avanti o verso l'interno; a livello del gomito, la rotazione interna farà sì

che il lato laterale si sposti anch'esso di circa metà del percorso verso il polso. In tal caso, la localizzazione del punto doloroso o del punto corrispondente risulterà inevitabilmente errata. Dopo aver aperto il software e selezionato la lingua, nella barra degli strumenti sarà visibile uno strumento di misurazione, progettato specificamente per la testa e per la regione toraco-addominale. Dopo aver fatto clic sullo strumento di misurazione, fare prima clic sul punto O, quindi spostare il mouse verso l'area dolorosa: il punto rosso indica il punto corrispondente. Per gli arti, è possibile fare clic direttamente sull'area dolorosa; sia il punto corrispondente sia l'area dolorosa verranno visualizzati in rosso.

Le immagini non riportano indicazioni di destra/sinistra, ma nella parte inferiore sono presenti delle frecce: la freccia indica il lato dell'operatore del computer e l'immagine rappresenta quindi il lato del paziente. Se è necessario visualizzare l'altro lato, è possibile fare clic sul pulsante di inversione dell'immagine nella barra degli strumenti.

Questo software è stato progettato per consentire al maggior numero possibile di persone di localizzare i punti con precisione. Per quanto riguarda i fondamenti teorici più approfonditi e il meccanismo di funzionamento della tecnica 3C, è possibile consultare il nostro libro « *Sollievo rapido dal dolore con la tecnica 3C* ». Il libro è disponibile in versione cinese, francese e inglese. Il link per l'acquisto è disponibile sul sito della nostra associazione: <https://santemtc.com>

Sul sito della nostra associazione sono inoltre disponibili diversi video di presentazione della tecnica 3C a supporto dell'apprendimento.

È inoltre possibile unirsi al « Gruppo di studio WeChat 3C 2025 Svezia ». Ciò può avvenire tramite la raccomandazione di un amico, inviandoci un'e-mail (contact@santemtc.com), lasciando un commento sotto i video oppure scrivendoci nella sezione « *Testimonianze degli agopuntori dopo l'apprendimento della tecnica 3C* »:

<https://santemtc.com/3c-temoin>

Grazie per la vostra fiducia e il vostro sostegno.

Associazione Internazionale per la Salute Naturale

Español :

Requisitos técnicos para el uso del software 3C

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

Gracias a este software basado en la « técnica 3C para el alivio rápido y preciso del dolor », es posible identificar de inmediato el punto correspondiente al dolor, es decir, el punto o la zona que debe ser masajeadada o tratada con punción.

Cuando se atiende a un paciente con dolor, la localización es fundamental antes de cualquier tratamiento. Para lograr una localización precisa, es indispensable colocar las extremidades del paciente en una posición estandarizada.

Posición estandarizada:

Ambos pies juntos, los dedos de los pies orientados hacia adelante, la mirada al frente; las extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos orientadas hacia adelante y el dorso de las manos hacia atrás.


En esta posición, para las extremidades superiores:

- el lado radial corresponde al lado lateral (externo),
- el lado cubital corresponde al lado medial (interno),

- la cara anterior es la cara flexora,
- la cara posterior es la cara extensora.

Para las extremidades inferiores:

- el lado fibular (peroneo) corresponde al lado lateral (externo),
- el lado tibial corresponde al lado medial (interno),
- la cara anterior es la cara extensora,
- la cara posterior es la cara flexora.

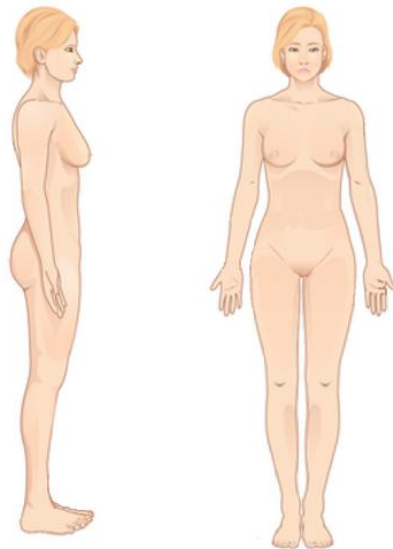

Al determinar un punto doloroso o buscar un punto correspondiente, es imprescindible colocar la extremidad en esta posición estandarizada. Si, por ejemplo, el antebrazo está en rotación (rotación interna), se producirá confusión: a nivel de la muñeca, el lado lateral se desplazará hacia adelante o hacia el interior; a nivel del codo, la rotación interna también hará que el lado lateral se desplace aproximadamente a la mitad del recorrido hacia la muñeca. En este caso, la localización del punto doloroso o del punto correspondiente será necesariamente incorrecta.

Después de abrir el software y seleccionar el idioma, en la barra de herramientas aparecerá una herramienta de medición, diseñada especialmente para la cabeza y la región toracoabdominal. Tras hacer clic en la herramienta de medición, haga primero clic en el punto O y luego mueva el ratón hacia la zona dolorosa; el punto rojo indica el punto correspondiente. Para las extremidades, puede hacer clic directamente sobre la zona dolorosa; tanto el punto correspondiente como la zona dolorosa se mostrarán en color rojo.

Las imágenes no indican izquierda o derecha, pero en la parte inferior aparecen flechas. La flecha apunta hacia el lado del operador del ordenador, por lo que la imagen representa el lado del paciente. Si necesita visualizar el lado opuesto, puede hacer clic en el botón de inversión de la imagen en la barra de herramientas.

Este software ha sido diseñado para permitir que el mayor número posible de personas localice los puntos con precisión. En cuanto a los fundamentos teóricos profundos y al mecanismo de funcionamiento de la técnica 3C, puede consultar nuestro libro « *Alivio rápido del dolor con la técnica 3C* ». Este libro está disponible en versiones en chino, francés e inglés. El enlace de compra se encuentra en el sitio web de nuestra asociación:

<https://santemtc.com>

En el sitio web de nuestra asociación también encontrará varios videos de presentación de la técnica 3C para apoyar su aprendizaje.

Asimismo, puede unirse al « Grupo de aprendizaje WeChat 3C 2025 Suecia ». Para ello, puede hacerlo mediante la recomendación de un amigo, enviándonos un correo electrónico (contact@santemtc.com), dejando un comentario debajo de los videos o escribiéndonos en la sección « *Testimonios de acupuntores tras el aprendizaje de la técnica 3C* »: <https://santemtc.com/3c-temoin>


Gracias por su confianza y su apoyo.

Asociación Internacional de Salud Natural

Русский

Технические требования по использованию программы 3C (3C Rapid Pain Relief 1.0)

С помощью программы «Технология быстрого и точного устранения боли 3C» вы можете мгновенно найти точку, соответствующую болевой зоне, то есть точку или область, которую необходимо массировать или подвергнуть иглоукалыванию. Когда вы работаете с пациентом, испытывающим боль, перед началом лечения крайне важно правильно определить локализацию. Для точного определения положения конечности пациента должны быть приведены в стандартное положение.

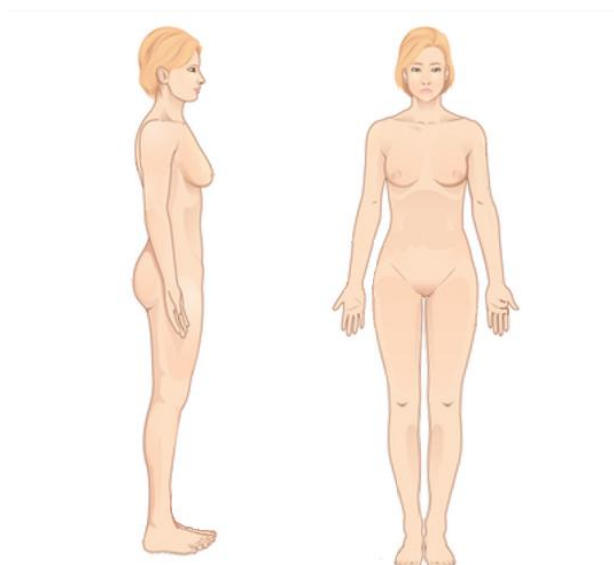

Стандартное положение: стопы сомкнуты, носки направлены вперёд, взгляд направлен прямо перед собой, верхние конечности опущены вдоль тела, ладони обращены вперёд, тыльная сторона кистей — назад. В этом положении для верхней конечности лучевая сторона является наружной (латеральной), локтевая сторона — внутренней (медиальной), передняя поверхность — сгибательной, задняя поверхность — разгибательной.

Для нижней конечности малоберцовая сторона является наружной (латеральной), большеберцовая сторона — внутренней (медиальной), передняя поверхность — разгибательной, задняя поверхность — сгибательной.

При определении болевой точки или поиске соответствующей ей точки конечность обязательно должна находиться в этом стандартном положении. Если, например,

предплечье повернуто внутрь (пронировано), это приведёт к путанице: для лучезапястного сустава наружная сторона смещается вперёд или внутрь, а локтевой сустав также оказывается повернутым внутрь, при этом наружная сторона смещается примерно на половину пути к лучезапястному суставу. В таком случае определение положения боли или соответствующей точки неизбежно окажется ошибочным.

После открытия программы и выбора языка вы увидите на панели инструментов измерительный инструмент, предназначенный специально для головы и грудобрюшной области. После нажатия на измерительный инструмент сначала щёлкните по точке О, затем переместите курсор мыши к болевой области — соответствующая точка будет отмечена красным кружком.

Для конечностей вы можете просто щёлкнуть непосредственно по болевой области — как болевая точка, так и соответствующая ей точка окрасятся в красный цвет.

На изображении не указано, где находится левая и где правая сторона, однако внизу есть стрелка: сторона, на которую указывает стрелка, соответствует стороне оператора компьютера, а изображение представляет сторону пациента. Если вам нужна другая сторона, вы можете нажать на кнопку отражения изображения на панели инструментов. Данная программа разработана для того, чтобы дать большему числу людей возможность точно определять точки воздействия. Что касается более глубокой теоретической основы и механизма работы технологии ЗС, вы можете ознакомиться с нашей книгой «Технология быстрого устранения боли ЗС», которая издана на китайском, французском и английском языках. Ссылку для приобретения книги можно найти на сайте нашей ассоциации: <https://santemtc.com>

На сайте нашей ассоциации также размещено несколько видеороликов, посвящённых технологии ЗС, которые могут служить вам учебным материалом.

Вы также можете присоединиться к группе «ЗС 2025 Швеция WeChat для изучения» — через рекомендацию друзей, написав нам на электронную почту (contact@santemtc.com), оставив комментарий под видео, или написав нам в разделе «Отзывы врачей-иглотерапевтов после изучения технологии ЗС» по адресу <https://santemtc.com/3c-temoin>.

Благодарим вас за доверие и поддержку.

Международная ассоциация натуральной медицины

: اللغة العربية

المتطلبات التقنية لاستخدام برنامج 3

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

للتخفيف السريع والدقيق من الألم، يمكنكم تحديد النقطة المرتبطة بالألم بفضل هذا البرنامج القائم على «تقنية 3 فوراً، أي النقطة أو المنطقة التي يجب تدليكها أو علاجها بالإبر. أمراً أساسياً قبل أي علاج. ولتحقيق تحديد دقيق، من دقة تحديد الموضع عند التعامل مع مريض يعاني من الألم، تُعد وضعية قياسية ضرورية وضع أطراف المريض في


الوضعية القياسية

القدمان متلاصقتان، وأصابع القدمين متجهة إلى الأمام، والنظر إلى الأمام مباشرة؛ الطرفان العلويان مسترخيان على جانبي الجسم، راحتا اليدين متجهتان إلى الأمام، وظهر اليدين إلى الخلف

الأطراف العلوية في هذه الوضعية، بالنسبة إلى

- يقابل الجانب الخارجي، (Radial) الجانب الكعبري

- يقابل الجانب الداخلي، (Ulnar) الجانب الزندي
 - السطح الأمامي هو السطح القابض،
 - السطح الخلفي هو السطح الباسط
- الأطراف السفلية وبالنسبة إلى:
 - يقابل الجانب الخارجي، (Fibular / Peroneal) الجانب الشظوي
 - يقابل الجانب الداخلي، (Tibial) الجانب الظنبوبي
 - السطح الأمامي هو السطح الباسط،
 - السطح الخلفي هو السطح القابض

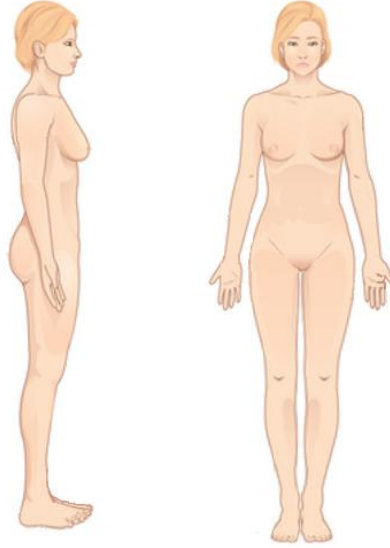

عند تحديد نقطة الألم أو البحث عن النقطة المقابلة لها، يجب وضع الطرف حتمًا في هذه الوضعية القياسية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الساعد في حالة دوران (دوران داخلي)، فسيؤدي ذلك إلى حدوث التباس: على مستوى المعصم، ينتقل الجانب الخارجي إلى الأمام أو إلى الداخل؛ وعلى مستوى المرفق، يؤدي الدوران الداخلي أيضًا إلى انتقال الجانب الخارجي لمسافة تقارب نصف المسار باتجاه المعصم. وفي هذه الحالة، سيكون تحديد موضع نقطة الألم أو النقطة المقابلة لها بالضرورة غير دقيق.

صُممت خصيصًا للرأس ومنطقة الصدر أداة قياس بعد فتح البرنامج واختيار اللغة، ستشاهدون في شريط الأدوات، ثم حركوا المؤشر نحو المنطقة المؤلمة؛ حيث تشير O والبطن. بعد النقر على أداة القياس، انقرروا أولاً على النقطة النقطة الحمراء إلى النقطة المقابلة.

أما بالنسبة إلى الأطراف، فيمكنكم النقر مباشرة على المنطقة المؤلمة؛ وستظهر كل من النقطة المقابلة والمنطقة المؤلمة باللون الأحمر.

لا تحتوي الصور على تحديد لليمين أو اليسار، لكن تظهر في الأسفل أسهم توضيحية؛ يشير السهم إلى جهة مستخدم زر قلب الكمبيوتر، وتمثل الصورة بالتالي جهة المريض. وإذا احتجتم إلى عرض الجهة الأخرى، يمكنكم النقر على في شريط الأدوات الصورة.

تم تصميم هذا البرنامج لتمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من تحديد النقاط بدقة. أما فيما يخص الأسس النظرية يتوفر هذا الكتاب «C/التخفيف السريع من الألم بتقنية 3»، فيمكنكم الرجوع إلى كتابنا العميقة وآلية عمل تقنية 3 باللغات الصينية والفرنسية والإنجليزية. ويمكن العثور على رابط الشراء على موقع جمعيتنا

<https://santemtc.com>

لأدعم عملية التعلم كما ستجدون على موقع جمعيتنا عدة مقاطع فيديو تعريفية بتقنية 3 ، وذلك من خلال توصية أحد الأصدقاء، « السويد WeChat 3C 2025 مجموعة التعلم » ويمكنكم أيضًا الانضمام إلى ، أو ترك تعليق أسفل مقاطع الفيديو، أو (contact@santemtc.com) أو عبر مراسلتنا بالبريد الإلكتروني «شهادات أطباء الوخز بالإبر بعد تعلم تقنية 3» مراسلتنا ضمن قسم

<https://santemtc.com/3c-temoin>

شكرًا لثقتكم ودعمكم

日本語：

3C ソフトウェア使用に関する技術要件

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

本ソフトウェアは「痛みを迅速かつ正確に緩和する 3C 技術」に基づいて設計されており、痛みに対応するポイント、すなわちマッサージや鍼刺を行うべき点または部位を即座に特定することができます。

痛みを有する患者に対応する際、治療に先立って正確な位置特定が極めて重要です。正確に位置を特定するためには、患者の四肢を標準姿勢に整えることが不可欠です。

標準姿勢：

両足をそろえ、つま先は前方に向け、視線は正面へ。両上肢は体側に自然に下ろし、手のひらは前方、手の甲は後方に向けます。


この姿勢において、上肢では以下のように定義されます：

- 橈側（とうそく）は外側、
- 尺側（しゃくそく）は内側、
- 前面は屈側、
- 後面は伸側。

下肢では以下のように定義されます：

- 腓側（ひそく / 腓骨側）は外側、
- 脛側（けいそく / 脛骨側）は内側、
- 前面は伸側、
- 後面は屈側。

痛点を特定する場合、または対応点を探す際には、必ず四肢をこの標準姿勢に保つ必要があります。例えば前腕が回旋している場合（内旋）、混乱が生じます。手関節では外側が前方または内側へ移動し、肘関節でも内旋によって外側が手関節方向へ約半分ほどずれてしまいます。このような状態では、痛点や対応点の位置特定は必然的に誤ってしまいます。

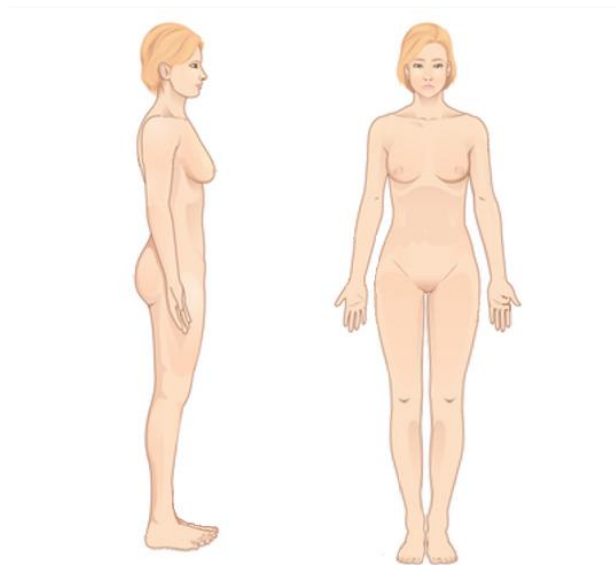

ソフトウェアを起動し言語を設定すると、ツールバーに測定ツールが表示されます。このツールは頭部および胸腹部専用に設計されています。測定ツールをクリックした後、まず0点をクリックし、次にマウスを痛みのある部位へ移動させてください。赤い点が対応点を示します。

四肢の場合は、痛みのある部位を直接クリックすることができます。対応点と痛みの部位の両方が赤色で表示されます。

画像には左右の表示はありませんが、下部に矢印が表示されています。この矢印はコンピュータ操作者側を示しており、画像は患者側を表しています。反対側を表示したい場合は、ツールバー内の画像反転ボタンをクリックしてください。

本ソフトウェアは、より多くの人々が正確に取穴できるように設計されています。3C技術のより深い理論的背景および作動メカニズムについては、弊会が出版した書籍

『3C技術による迅速な疼痛緩和』をご参照ください。本書は中国語版、フランス語版、英語版がございます。購入リンクは当協会のウェブサイトに掲載されています：<https://santemtc.com>

また、当協会のウェブサイトには、3C技術を学習するための紹介動画も複数掲載されています。

さらに、「3C 2025 スウェーデン WeChat 学習グループ」に参加することも可能です。ご友人からの紹介、メールでのご連絡 (contact@santemtc.com)、動画下へのコメント、または「3C技術を学習した鍼灸師の体験談」ページ <https://santemtc.com/3c-temoin>

への書き込みにてお知らせください。

ご信頼とご支援に心より感謝申し上げます。

国際自然健康協会

한국어:

3C 소프트웨어 사용을 위한 기술적 요구 사항

(3C Rapid Pain Relief 1.0)

본 소프트웨어는 「통증을 빠르고 정확하게 완화하는 3C 기술」을 기반으로 설계되었으며, 통증에 대응하는 지점, 즉 마사지하거나 침 치료를 해야 할 점 또는 부위를 즉시 확인할 수 있습니다.

통증을 호소하는 환자를 치료할 때에는 치료에 앞서 정확한 위치 설정이 매우 중요합니다. 정확한 위치를 설정하기 위해서는 환자의 사지를 표준 자세로 배치하는 것이 필수적입니다.

표준 자세:


양발을 가지런히 모으고 발끝은 정면을 향하게 하며, 시선은 정면을 바라봅니다. 양쪽 상지는 몸의 양옆으로 자연스럽게 늘어뜨리고, 손바닥은 앞을 향하게 하며 손등은 뒤를 향하게 합니다.

이 자세에서 상지(팔)**의 기준은 다음과 같습니다:

- 요측(Radial)은 외측에 해당하고,
- 척측(Ulnar)은 내측에 해당하며,
- 앞쪽 면은 굴측,
- 뒤쪽 면은 신측입니다.

하지(다리)의 기준은 다음과 같습니다:

- 비측(Fibular / Peroneal)은 외측,
- 경측(Tibial)은 내측,
- 앞쪽 면은 신측,
- 뒤쪽 면은 굴측입니다.

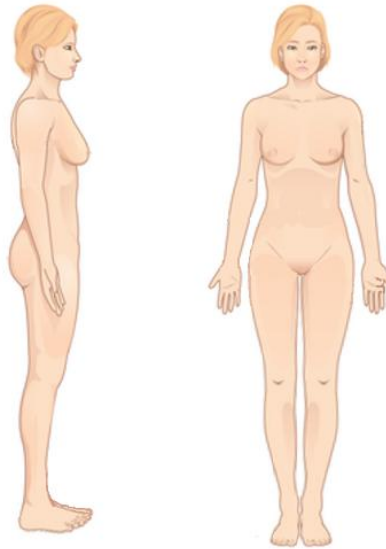

통증 부위를 확인하거나 대응점을 찾을 때에는 반드시 사지를 이 표준 자세로 유지해야 합니다. 예를 들어, 전완이 회전된 상태(내회전)에 있으면 혼란이 발생합니다. 손목 부위에서는 외측이 앞쪽이나 안쪽으로 이동하게 되고, 팔꿈치 부위에서도 내회전으로 인해 외측이 손목 방향으로 약 절반 정도 이동하게 됩니다. 이러한 경우 통증 부위나 대응점의 위치는 필연적으로 잘못 설정됩니다.

소프트웨어를 실행하고 언어를 선택하면, 도구 모음에 측정 도구가 표시되며, 이는 머리와 흉복부 부위를 위해 특별히 설계된 것입니다. 측정 도구를 클릭한 후 먼저 O 지점을 클릭하고, 마우스를 통증 부위로 이동하면 빨간 점이 대응점을 나타냅니다. 사지의 경우에는 통증이 있는 부위를 직접 클릭할 수 있으며, 대응점과 통증 부위가 모두 빨간색으로 표시됩니다.

이미지에는 좌우 표시가 없지만, 하단에 화살표가 표시되어 있습니다. 이 화살표는 컴퓨터 조작자 쪽을 가리키며, 이미지는 환자의 쪽을 나타냅니다. 반대쪽을 확인해야 할 경우에는 도구 모음에 있는 이미지 반전 버튼을 클릭하면 됩니다. 본 소프트웨어는 더 많은 사람들이 정확하게 혈자리를 찾을 수 있도록 설계되었습니다. 3C 기술의 보다 심층적인 이론적 근거와 작동 메커니즘에 대해서는 저희가 출판한 도서 「3C 기술을 통한 빠른 통증 완화」를 참고하시기 바랍니다. 이 책은 중국어, 프랑스어, 영어판으로 출판되어 있으며, 구매 링크는 협회 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다:

<https://santemtc.com>

또한 협회 웹사이트에는 3C 기술을 학습하는 데 도움이 되는 여러 소개 영상이 제공되어 있습니다.

아울러 ** 「3C 2025 스웨덴 WeChat 학습 그룹」 **에 참여하실 수도 있습니다. 친구의 소개를 통해서나, 이메일(contact@santemtc.com)로 문의하시거나, 영상 아래에 댓글을 남기시거나,

「3C 기술을 학습한 침구사의 후기」 페이지

<https://santemtc.com/3c-temoin>

에 글을 남겨 저희에게 알려주시면 됩니다.

신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.

국제 자연 건강 협회